


Safety recommendations


- Read the instructions for use carefully (find this at: www.lopital.com) before use.
- Maximum load 150 kg.
- Make sure that the chair is on the brake during client transfers from and to the device.
- Place both feet on the foot supports.
- Front closure is closed during up / down movements and arms should rest on armrest.
- Only relocate and move the chair in the lower position.

Operation

Up

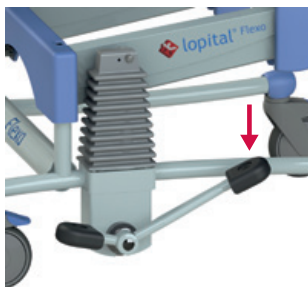

Down

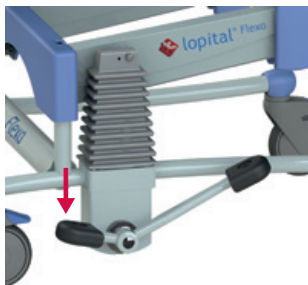

Important!

This instruction card may not be considered a replacement for the instructions for use.




Use

1. Place the chair in the right position and fold the foot plates up.
2. Apply the brake to the chair!
3. Open the armrests and fold these up if necessary.
4. Support the less able person when they are taking a seat.
5. Shut the armrests and let the client's feet rest on the foot plates.

Stand up by carrying out the same procedure (back to front).

Wheel blocking

1. Wheel blocking.
2. Unlocking.

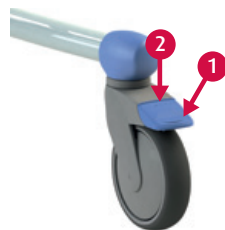


Foot rest



Both foot plates must be folded away for the less able person to take a seat in the chair. To do so, fold up the foot plates (1) or turn out both supports (2). Make sure that the less able person has both feet on the foot plates when moving.

Armrest with front closure

1. Unlocking.
2. Rotating.
3. Folding up.

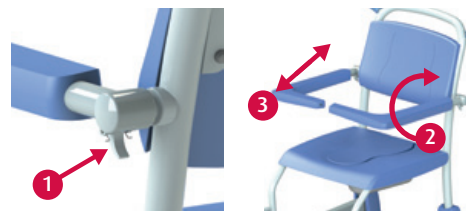

Toilet function

- Remove the lid on the seat before the person sits down in the chair.
- *In combination with toilet:* The Flexo can be moved over almost every toilet. Move the chair upwards or downwards to achieve the right position.
- *With bedpan:* The Flexo can also be used as a toilet chair. Simply slide the stainless steel / plastic bedpan under the chair using the guides.

Cleaning and maintenance

The Flexo must be cleaned after every use, with water and regular household cleaning agents. Do not use any abrasive or other aggressive cleaning products. Check the wheels regularly for hairs, dust and soap residues and remove when necessary.

The complete maintenance schedule can be found in the instructions for use (**find this at: www.lopital.com**).

In the event of a breakdown, contact Lopital.
Tel: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Instructions for use


For the full instructions for use go to **www.lopital.com**

Sicherheitsvorschriften


- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: www.lopital.de) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 150 kg.
- Achten Sie darauf, dass die Rollen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.
- Frontverschluss beim Anheben / Absenken schließen und Arme auf den Armlehnen ruhen lassen.
- Fahren und manövrieren Sie den Stuhl nur in einer tiefen Position.

Bedienung

Anheben

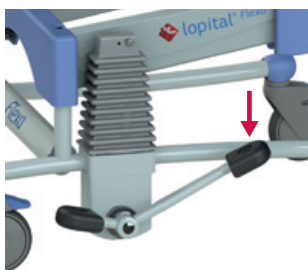

Absenken

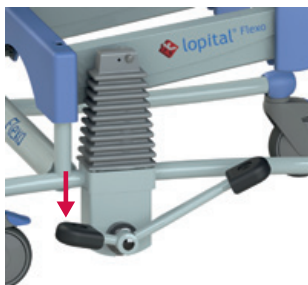

Wichtig!

Diese Instruktionkarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.




Gebrauch

1. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position und klappen Sie die Fußstützen nach oben.
2. Arretieren Sie den Stuhl!
3. Öffnen Sie die Armlehnen und klappen Sie diese bei Bedarf nach oben.
4. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
5. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.

Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Rollenblockierung

1. Rollenblockierung.
2. Entriegeln.

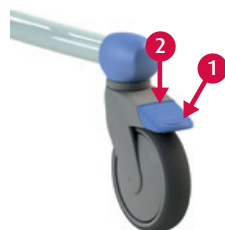


Fußstütze



Beide Fußplatten müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Dazu klappen Sie die Fußplatten (1) hoch oder drehen beide Stützen (2) zur Seite. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

Armlehne mit Frontverschluss

1. Entriegeln.
2. Drehen.
3. Hochklappen.

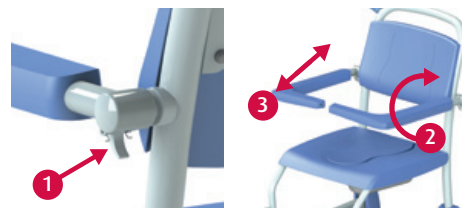

Toilettenfunktion

- Entfernen Sie den Sitzdeckel, bevor der Klient auf dem Stuhl Platznimmt.
- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Flexo Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden. Bewegen Sie den Stuhl bei Bedarf nach oben oder unten, um die richtige Position zu erreichen.
- *Mit Behälterführung:* Der Flexo Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoffbehälter unter den Stuhl.

Reinigung und Wartung

Der Flexo Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf.

Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Kontakt auf.

Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: www.lopital.de