


Safety recommendations

- Read the instructions for use carefully (find this at: www.lopital.com) before use.
- Maximum load 180 kg.
- Make sure that the chair is on the brake during client transfers from and to the device.
- Place both feet on the foot support.
- Armrests are closed during up / down movements and arms should rest on armrest.
- Only relocate and move the chair in the lower position.

Operation panel

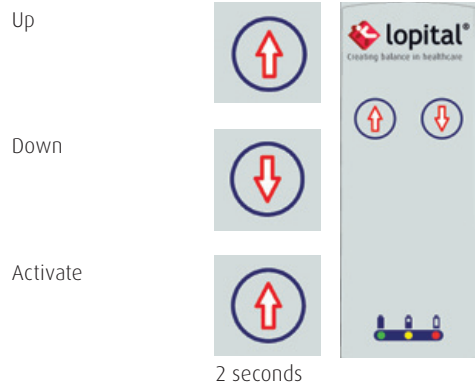

Important!

This instruction card may not be considered a replacement for the instructions for use.




Use

1. Activate the Elexo by pressing the 'up' button for 2 seconds.
Note: After use, the Elexo will go into a sleep setting after 60 minutes.
2. Place the chair in the right position and fold the foot supports up.
3. Apply the brake to the chair!
4. Open the armrests and fold these up if necessary.
5. Support the less able person when they are taking a seat.
6. Shut the armrests and let the client's feet rest on the foot plates.


Stand up by carrying out the same procedure in reverse order.

Wheel blocking

1. Wheel blocking.
2. Unlocking.

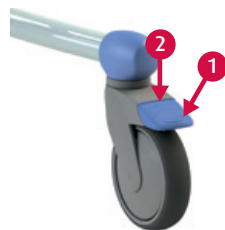


Foot rest

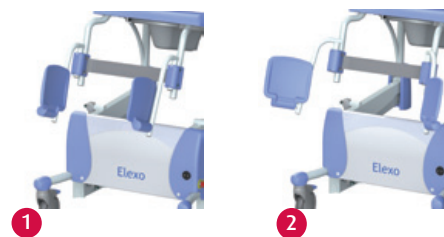

Both foot plates must be turned away for the less able person to take a seat in the chair. Make sure that the person places both feet on the foot plates when the chair is moving.

Armrest with front closure

1. Unlocking.
2. Rotating.
3. Folding up.

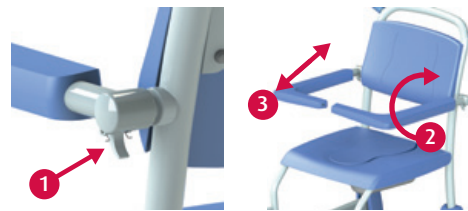

Charging batteries

After using the Elexo, connect it to the charger to maintain the batteries.



- | | |
|-----------------|---------------------------|
| Off | Sleep setting. |
| Green | Chair ready to use. |
| Blinking orange | Emergency stop activated. |
| Orange | Battery is half empty. |
| Blinking red | Battery almost empty. |
| Red | Battery empty. |


The Elexo will not work during charging.

Toilet function

- Remove the lid on the seat before the person sits down in the chair.
- *In combination with toilet:* The Elexo can be placed over almost all toilets. Move the chair up or down to achieve the right position.
- *With bedpan:* The Elexo can also be used as a toilet chair. Simply slide the stainless steel / plastic bedpan under the chair using the guides.

Emergency lowering

If the Elexo breaks down, you can lower the chair using the emergency lowering button.

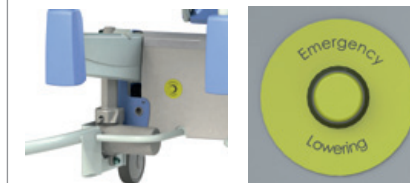

Cleaning and maintenance

The Elexo must be cleaned after every use, with water and regular household cleaning agents. Do not use any abrasive or other aggressive cleaning products. Check the wheels regularly for hairs, dust and soap residues and remove when necessary.

The complete maintenance schedule can be found in the instructions for use (**find this at: www.lopital.com**).

In the event of a breakdown, contact Lopital.
Tel: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Instructions for use

For the full instructions for use go to **www.lopital.com**

Sicherheitsvorschriften

- Lesen Sie die Benutzeranleitung (zu finden auf: www.lopital.de) vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Maximale Belastung 180 kg.
- Achten Sie darauf, dass die Feststellbremsen bei einem Transfer von und zum Stuhl arretiert sind.
- Stellen Sie die Füße auf die Fußstütze.
- Frontverschluss beim Anheben / Absenken schließen und Arme auf den Armlehnen ruhen lassen.
- Fahren und manövrieren Sie den Stuhl nur in einer tiefen Position.

Bedienung

Anheben		  
Absenken		
Aktivieren		

2 Sekunden

Wichtig!

Diese Instruktionkarte darf nicht als Ersatz für die Benutzeranleitung betrachtet werden.



Gebrauch


1. Aktivieren Sie den Elexo Stuhl indem Sie den Anhebeknopf 2 Sekunden gedrückt halten. Achtung: Nach Gebrauch geht der Elexo Stuhl innerhalb von 60 Minuten in den Schlafstand über.
2. Bringen Sie den Stuhl in die gewünschte Position und klappen Sie die Fußstützen nach oben.
3. Arretieren Sie den Stuhl!
4. Öffnen Sie die Armlehnen und klappen Sie diese bei Bedarf nach oben.
5. Unterstützen Sie den Klienten beim Setzen.
6. Schließen Sie die Armlehnen und lassen Sie die Füße des Klienten auf den Fußplatten ruhen.

Das Aufstehen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Rollenblockierung




Fußstütze

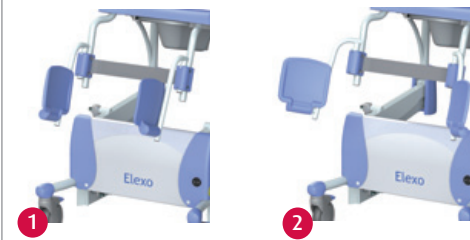

Beide Fußplatten müssen weggeklappt werden, wenn der Klient sich in den Stuhl setzt. Dazu klappen Sie die Fußplatten (1) hoch oder drehen beide Stützen (2) zur Seite. Achten Sie darauf, dass der Klient beim Transport mit beiden Füßen auf den Fußplatten ruht.

Armlehne mit Frontverschluss

1. Entriegeln.
2. Drehen.
3. Hochklappen.

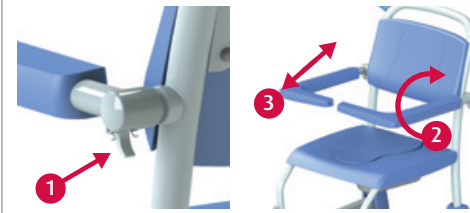

Batterie aufladen

Schließen Sie den Elexo Stuhl nach dem Gebrauch an den Lader an, um die Batterien zu schonen.



- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| Aus | Schlafstand. |
| Grün | Stuhl betriebsbereit. |
| Blinkt orange | Notabschaltvorrichtung ist aktiviert. |
| Orange | Batterie ist halb leer. |
| Blinkt rot | Batterie fast leer. |
| Rot | Batterie leer. |


Während des Ladens funktioniert den Elexo Stuhl nicht.

Toilettenfunktion

- Entfernen Sie den Sitzdeckel, bevor der Klient auf dem Stuhl platznimmt.
- *In Kombination mit einer Toilette:* Der Elexo Stuhl kann über fast jede Toilette gefahren werden. Bewegen Sie den Stuhl bei Bedarf nach oben oder unten, um die richtige Position zu erreichen.
- *Mit Behälterführung:* Der Elexo Stuhl kann auch als Toilettenstuhl benutzt werden. Schieben Sie dazu den Edelstahl- / Kunststoffbehälter unter den Stuhl.

Notabsenkung

Bei einem Funktionsausfall kann der Elexo Stuhl mithilfe der Notabsenkung abgesenkt werden.

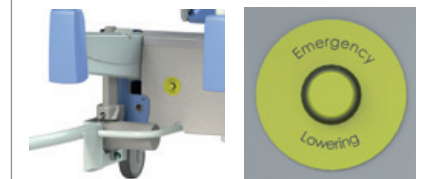

Reinigung und Wartung

Der Elexo Stuhl muss nach jedem Gebrauch mit Wasser und normalen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie dafür keine Scheuermittel oder andere aggressive Lösungsmittel. Kontrollieren Sie regelmäßig die Rollen auf Haare, Seifenreste und Staub und entfernen Sie diese bei Bedarf.

Den vollständigen Wartungsplan finden Sie in der Benutzeranleitung (www.lopital.de).

Im Falle einer Störung nehmen Sie bitte mit Lopital Kontakt auf.

Tél: +31 (0)13 - 5239300, **Fax:** +31 (0)13 - 5239301
E-mail: service@lopital.nl

Benutzeranleitung

Eine umfangreiche Benutzeranleitung finden Sie auf: www.lopital.de